

## Recommandations pour le prélèvement de sang

### Rappel avant Ponction

Vérifier l'identité du patient et la concordance avec la prescription

### Préparation

Port de gants

Désinfection Circulaire du site de ponction.

Ne jamais palper le site après désinfection.

### Pose du garrot

Le garrot ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine.



### Choix du site de ponction

Ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.



### Prélèvement des flacons ou des tubes

Positionner le tube, étiquette vers le bas pour visualiser l'arrivée du sang dans le tube.

Ne jamais faire tourner le tube à l'intérieur du corps s'il est déjà percuté.



### Ordre de prélèvement des tubes

Flacons aérobie puis anaérobie

Ou tube de Purge si prélèvement réalisé à l'épicrânienne.

Tube(s) pour la Coagulation

Autres tubes

Si tube Héparine VERT demandé,

ne jamais le prélever avant le tube Coag BLEU

**Homogénéisation des tubes** par 6 à 8 retournements lents en fin de prélèvement

**Eliminer** l'aiguille une fois sécurisée dans le container pour objet coupant/tranchant

**Identifier** immédiatement les tubes

Bilan Hémoc + tubes



1



COAG

2

Bilan tubes avec aiguille Eclipse

Le tube Coag est prélevé en 1<sup>ère</sup> position



COAG

1

Bilan tubes réalisé à épicrânienne




Purge 1



COAG

2

Envoyer le tube de purge au laboratoire avec les autres tubes

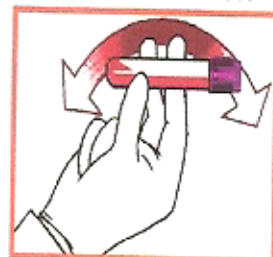

x 6 - 8